

usmile

Uživatelská příručka pro sonický elektrický zubní kartáček usmile P1




Model P1

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek z řady orální péče usmile. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku. Příručku si uložte pro pozdější použití.

Popis jednotlivých dílů

- Po nasazení hlavice kartáčku zůstává mezi spodní částí hlavice a tělem kartáčku mezera asi 0,5–1 mm, aby mohla hlavice správně vibrovat.
- Spuštění: Kartáček spustíte krátkým stisknutím tlačítka pro zapnutí / volbu režimu.
- Přepínání režimu čištění: Opětovným stisknutím tlačítka pro zapnutí / volbu režimu do 4 sekund od spuštění můžete přepínat mezi režimy.
- Přerušení a vypnutí: Opětovným stisknutím tlačítka pro zapnutí / volbu režimu po uplynutí 4 sekund od spuštění přerušíte chod kartáčku. Netrvá-li přerušení déle než 20 sekund, bude kartáček pokračovat v chodu. Pokud po dobu 20 sekund nebude kartáček použit, automaticky se vypne.

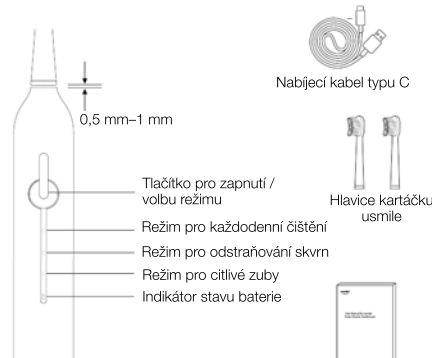

Nabíjecí kabel typu C



Hlavice kartáčku usmile



Uživatelská příručka

1

Bezpečnostní opatření

Při používání kartáčku prosím dodržujte tato bezpečnostní opatření.

- Výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii. Před likvidací spotřebiče je třeba tuto baterii vyjmout. Při vyjímání baterie musí být výrobek odpojený od sítě. Baterii je třeba zlikvidovat bezpečným způsobem a její výměnu může provádět pouze kvalifikovaný odborník.
- Nepoužívejte výrobek během nabíjení.
- Před použitím si ověřte, že je nabíjecí port řádně zakrytý.
- Nikdy neopravujte tento výrobek sami.
- Nabíjecí kabel, který je připojený k výrobku, nesmí být umístěn ve vlhku nebo ve vodě.
- Chraňte výrobek před pádem a prudkými nárazy.
- Nepoužívejte výrobek v době, kdy se sprchujete, koupete nebo si dáváte parní lázeň.
- Pokud trpíte závažnou parodontitidou, podstupujete zubní ošetření nebo vás trápí nepříjemné pocity v ústech, konzultujte prosím použití předem se svým zubním lékařem.
- K čištění výrobku nikdy nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol ani jiné chemikálie.
- Pokud s používáním tohoto výrobku teprve začínáte, může se objevit slabé krvácení, protože vaše dásně ještě nejsou na podobný způsob dráždění zvyklé. Po uplynutí jednoho či dvou týdnů krvácení obvykle ustane. Pokud krvácení přetrvává i po dvou týdnech, může to být způsobeno neobvyklým stavem vašich dásní. V tom případě přestaňte výrobek používat a situaci konzultujte se svým zubním lékařem.
- Během prvních dnů používání můžete v ústní dutině pociťovat svědění. Jedná se o běžný jev, protože povrch vašeho jazyka a ústní dutiny není ještě zvyklý na vysokofrekvenční vibrace hlavice kartáčku. Po několika dnech pravidelného používání pocit svědění ustane.
- Pokud se na výrobku objeví poškození, rez, prasklina apod., ihned ho přestaňte používat.
- Nepoužívejte hlavici kartáčku s polámanými nebo zohýbanými štětinami. Hlavici kartáčku vyměňte každé tři měsíce, v případě opotřebení i dříve. Nepoužívejte jiné než výrobem doporučené hlavice kartáčku.
- Děti starší 12 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento výrobek používat pouze pod dohledem nebo pokud byly řádně poučeny o jeho bezpečném použití a jsou si vědomy souvisejících rizik. Čištění a uživatelskou údržbu kartáčku nesmějí provádět děti, nejsou-li starší 12 let a pod dohledem. Výrobek není určen jako hračka pro děti.

2

- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti.
- Výrobek použijte pouze pro zamýšlený účel popsany v této příručce. Nepoužívejte nástavce, které nedoporučuje výrobce.
- Pokud vám výrobek upadne, je třeba před dalším použitím vyměnit hlavici, a to i v případě, že nevykazuje žádné viditelné poškození.
- Výrobek nerozebírejte, s výjimkou vyjímání baterie před likvidací.
- Pokud podstupujete jakýkoli lékařský zákrok v ústní dutině, poradte se před použitím se svým zubním lékařem.
- Tento výrobek je určený pro osobní péči, nikoli pro použití u více pacientů ve stomatologické ordinaci nebo klinice.
- Výrobek nezapojte ke zdroji napájení, který neodpovídá specifikacím. Při použití nesprávného napětí dojde k poškození výrobku.

Elektromagnetické pole (EMF) ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA


Toto zařízení splňuje všechny normy týkající se elektromagnetických polí. Při správné manipulaci podle pokynů obsažených v této příručce je jeho použití bezpečné. Pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo jiné zařízení, poradte se před použitím kartáčku se svým lékařem a s výrobcem zařízení.

Postup při čištění zubů



Zuby si řádně vyčistíte. Mezi štětinami kartáčku a povrchem zubu se při čištění z vnější i vnitřní strany zubů doporučuje pro efektivnější vyčištění udržovat úhel 45°.

3

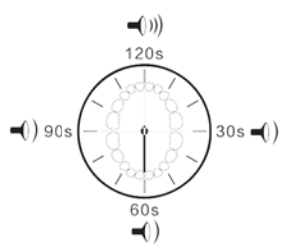

Doporučuje se rozdělit si pomyslně chrup na čtyři oblasti a čištění každé z nich věnovat 30 sekund.

Popis režimů čištění

Režim pro každodenní čištění: V tomto režimu si budete čistit zuby mírným tlakem po dobu čtyř minut. Každých 30 sekund kartáček jedenkrát zavibruje a upozorní vás tak, abyste přešli na další část chrupu. Po uplynutí prvních dvou minut zavibruje kartáček třikrát po sobě a dá vám tak najevo, že doba čištění uplynula. Pokud nestisknete vypínací tlačítko, bude kartáček dále pracovat až do konce čtvrté minuty.


Režim pro odstraňování skvrn: Po dobu 2,5 minuty bude probíhat čištění se zvýšenou intenzitou. Frekvence vibrací kartáčku se však bude měnit plynule. Během této doby kartáček každých 30 sekund jedenkrát zavibruje a upozorní vás tak, abyste přešli na další část chrupu. Po uplynutí dvou minut je zbývajících 30 sekund určeno pro leštění vnější strany zubů.

Režim pro citlivé zuby: V tomto režimu si budete jemně čistit chrup po dobu čtyř minut. Během této doby kartáček každých 30 sekund jedenkrát zavibruje a upozorní vás tak, abyste přešli na další část chrupu. Po uplynutí prvních dvou minut zavibruje kartáček třikrát po sobě a dá vám tak najevo, že doba čištění uplynula. Pokud nestisknete vypínací tlačítko, bude kartáček dále pracovat až do konce čtvrté minuty.

4

Nabíjení

- Kartáček je z výroby dodáván nabitý a připravený k použití.
- Jakmile začne LED kontrolka červeně blikat, dejte kartáček co nejdříve nabít. Plněno nabití dosáhne baterie během 4 až 5 hodin.
- Kartáček nabijte pomocí USB adaptéru splňujícího příslušné normy. Během nabíjení musí být kartáček umístěn v suchém prostředí.
- Snažte se nabít kartáček dříve, než dojde k úplnému vybití baterie.

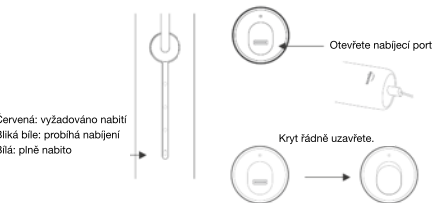

Očištění a uskladnění kartáčku

Po ukončení čištění vypněte kartáček stisknutím vypínacího tlačítka. Čistou vodou opláchněte hlavici a tělo kartáčku. Osušte ručnickem a svisle postavte na suchý povrch nebo vložte do kelímku.



5

Ochrana životního prostředí

Součástí sonického elektrického zubního kartáčku usmile je vestavěná dobíjecí lithiová baterie, kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Při likvidaci prosím dodržujte pravidla, jimiž se ve vaší zemi řídí tříděný sběr elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií.

Varování: Dbejte na to, aby byla baterie při vyjímání zcela vybitá.

Informace o výrobku

Informace o výrobku
Název výrobku: Sonický elektrický zubní kartáček usmile P1
Značka: usmile
Model: P1
Jmenovitý příkon: 5 W
Jmenovité napájení: 5 V = 1 A
Voděodolnost: IPX7
Specifikace baterie: Lithiová baterie 3,7 V, 2 500 mAh
Výrobce: Guangzhou Start Pulse Co., Ltd.
Kontakt na zákaznický servis: service@usmile.com

Závady a jejich řešení

Závada	Možné důvody	Řešení
Kartáček se při stisknutí tlačítka pro zapnutí/vypnutí nedaří spustit.	Výrobek je chráněn z důvodu nabíjení. Baterie je téměř vybitá.	Přerušte nabíjení. Připojte nabíjecí kabel a kartáček nabijte.
Nedaří se nasadit hlavici kartáčku na drák.	V dutině hlavice se usadily nečistoty nebo cizí těleso. Na dráku se usadily nečistoty nebo cizí těleso.	Pomocí vhodného nástroje odstraňte nečistoty z dutiny hlavice. Očistěte drák kartáčku.
Hlavice kartáčku vibruje velmi slabě.	Hlavice kartáčku není výrobek značky usmile. Hlavice kartáčku není správně nasazená. Mezi hlavici a tělem kartáčku se usadily nečistoty nebo cizí těleso.	Použijte kompatibilní hlavici kartáčku usmile. Znovu nasadte hlavici kartáčku. Sejměte hlavici kartáčku a odstraňte nečistoty.

6

Při nabíjení nesvíti kontrolka indikátoru stavu baterie.	Nesprávné připojení k napájení.	Řádně zapojte nabíjecí kabel.
Po nabíjení funguje výrobek jen velmi krátce.	Teplota okolního prostředí je velmi nízká. Doba nabíjení byla příliš krátká.	Výrobek nabíjejte a používejte uvnitř v místnosti s teplotou 15 °C až 35 °C. Dejte výrobek nabít.
Výrobek nelze spustit.	Baterie je téměř vybitá.	Dejte výrobek nabít.

7